



# SUMMIT™ 456

## SUMMIT™ ADJUSTABLE 456 TLSO

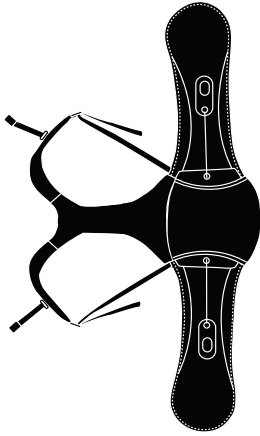

BELT SIZING FOR SUMMIT™ 456 TLSO (ADJUSTABLE ONLY)

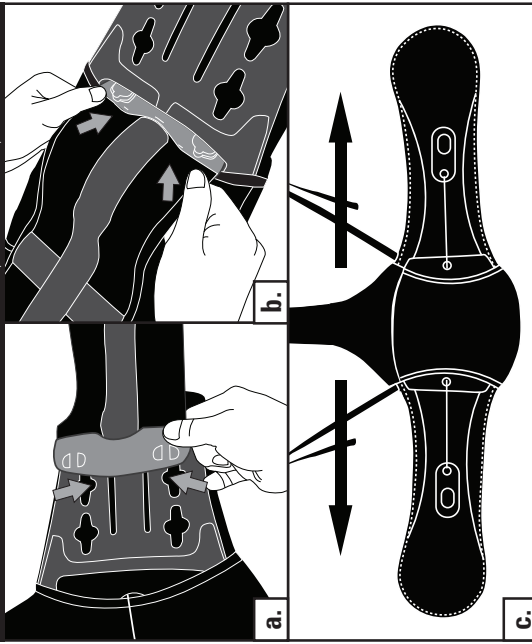

### ENGLISH

#### BELT SIZING

- Fit male tabs of belt through proper sizing adjustment holes in sides of back panel.
- For smaller sizes, slide side panel through sizing adjustment slot and then fit tabs through proper adjustment holes from the under side.
- Once proper size is achieved, pull taught to lock tabs in place.

### ESPAÑOL

#### TAMAÑO DE LA CORREA

- Coloque lengüetas macho a través de los orificios de ajuste de tamaño adecuados a los costados del panel posterior.
- Para los tamaños más pequeños, deslice el panel lateral a través de la ranura de ajuste de tamaño y luego coloque lengüetas a través de los orificios de ajuste adecuados desde el lado de abajo.
- Cuando se logre el tamaño adecuado, jale para tensar y trabar los lengüetas en su lugar.

### DEUTSCH

#### GURTEINSTELLUNG

- Die Rastköpfe durch die entsprechenden Größeneinstelllöcher stecken.
- Für kleinere Größen das Seitenteil durch den Größeneinstellschlitz schieben und anschließend die Nieten von der Unterseite durch die entsprechenden Einstelllöcher stecken.
- Wenn die richtige Größe eingestellt ist, festziehen, bis die Rastköpfe einrasten.

### ITALIANO

#### REGOLAZIONE DELLA CORRETTA MISURA

- Introdurre i perni all'interno degli appositi alloggiamenti posti ai lati del pannello posteriore del corsetto per definire la misura più corretta dello stesso.
- Per impostare la taglia più piccola, infilare uno dei pannelli laterali attraverso la "fessura" di regolazione della misura e conseguentemente inserire i perni negli alloggiamenti appropriati dal lato inferiore. Ripete l'operazione con l'altro pannello laterale.
- Una volta ottenuta la misura appropriata, tirare in maniera da fissare i perni all'interno degli alloggiamenti.

### FRANÇAIS

#### RÉGLAGE DE LA TAILLE DE LA CEINTURE

- Insérez les rivets mâles de la ceinture dans les orifices de réglage correspondants situés sur les côtés du panneau dorsal.
- Pour les petites tailles, glissez le panneau latéral dans la fente de réglage, puis introduisez les rivets dans les orifices de réglage correspondants par en-dessous.
- Une fois la taille voulue obtenue, tirez fermement dessus pour bloquer les rivets en position.

### 中文

#### 調整腰帶長度

- 將腰帶尾端突起的铆釘穿過背版旁的長度調整孔中。
- 如果長度需要大幅縮短，可將腰帶尾端的铆釘版插入背版旁的長度調整槽，然後從下方拉回後，將铆釘穿過適當的長度調整孔中。
- 長度調整合適後，拉緊腰帶，以便將铆釘鎖定在位。

SUMMIT™ 456	EXTRA SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	EXTRA LARGE	EXTRA EXTRA LARGE
	26 - 31 inches 66 - 78 cm	30 - 37 inches 76 - 94 cm	36 - 43 inches 91 - 109 cm	42 - 49 inches 107 - 124 cm	48 - 55 inches 122 - 140 cm	54 - 60 inches 137 - 152 cm

\* The SUMMIT™ sizing follows closely to standard pants sizing. Size ranges are only guidelines. Your experience and personal assessment could make the difference in choosing the correct size. For the SUMMIT™ 456 add 2 inches for a better fit.



This product may be substantially modified, by an individual with expertise.

For more information, please visit  
[www.aspenmp.com/index.php/about-us/product-downloads/](http://www.aspenmp.com/index.php/about-us/product-downloads/).



**ENGLISH**  
**BACK PANEL**  
Custom form the malleable aluminum support in the back panel to properly fit patient anatomy.


**ESPAÑOL**  
**PANEL POSTERIOR**  
Modifique el soporte maleable de aluminio en el panel posterior para adaptarlo adecuadamente a la anatomía del paciente.

**DEUTSCH**  
**RÜCKENTEIL**  
Für einen anatomiegerechten Sitz am Patienten die formbare Alustütze im Rückenteil individuell formen.

**ITALIANO**  
**PANNELLO POSTERIORE**  
Conformare il supporto in alluminio malleabile nel pannello posteriore in modo che si adegui all'anatomia del paziente.

**FRAÇAIS**  
**PANNEAU DORSAL**  
Adaptez avec précision le support malleable en aluminium sur le panneau dorsal à l'anatomie du patient.

**中文**  
**背部支撑**  
改变背部面板上延展性铝质支撑的形状，以便适合患者的身体结构。

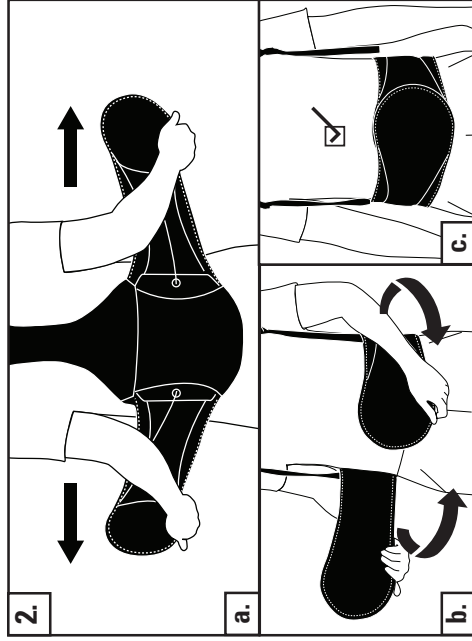

**ENGLISH**  
**PLACEMENT**  
a. Apply the fully stretched brace making sure the back panel is centered and low on the back.  
b. Overlap the ends of the brace so the hook material grips the opposite side loop as tightly as possible.  
c. Ends may be angled to accommodate for different anatomies.


**ESPAÑOL**  
**COLOCACIÓN**  
a. Despliegue totalmente la faja ortopédica y sitúela asegurándose de que el panel posterior quede centrado y bajo en la espalda.  
b. Superponga los extremos de la faja de modo que un lado de la cinta del velcro quede adherido al lado opuesto lo más ceñidamente posible.  
c. Los extremos se pueden colocar en ángulo para adaptarse a la anatomía de cada paciente.

**DEUTSCH**  
**ANLEGEN**  
a. Die vollständig gedehnte Rückenstützbandage anlegen und darauf achten, dass das Rückenteil zentriert und im unteren Rückenbereich anliegt.  
b. Die Enden der Stützbandage möglichst eng übereinanderlegen, so dass der Klettverschluss auf der gegenüberliegenden Seite eingreift.  
c. Die Enden können schräg übereinandergelegt werden, um die Bandage optimal an die Anatomie der jeweiligen Person anzupassen.

**ITALIANO**  
**POSIZIONAMENTO**  
a. Applicare il supporto completamente aperto assicurandosi che il pannello posteriore sia centrato sulla porzione inferiore della schiena.  
b. Sovrapporre le estremità del supporto in modo che uncinati afferrino il lato opposto in materiale ad esole mantenendo il supporto il più aderente possibile.  
c. Le estremità possono essere angolate per adattarsi a diverse conformazioni anatomiche.

**FRAÇAIS**  
**POSITIONNEMENT**  
a. Appliquez l'orthèse totalement étirée en veillant à ce que le panneau dorsal soit bien centré et positionné sur le bas du dos.  
b. Rabattez les extrémités de l'orthèse en les faisant se chevaucher de manière à ce que le système de fermeture velcro maintienne le côté opposé aussi étroitement que possible.  
c. Les extrémités peuvent être inclinées en fonction des différentes anatomies.

**中文**  
**放置**  
a. 放置完全拉开的腰带，核实背部的支撑放在腰部的中央。  
b. 将腰带两端重叠，以便使一端的锁扣面与另一端的环扣面尽量紧紧地贴在一起。  
c. 两端重叠时可呈一定的角度，以便适合不同的体型。

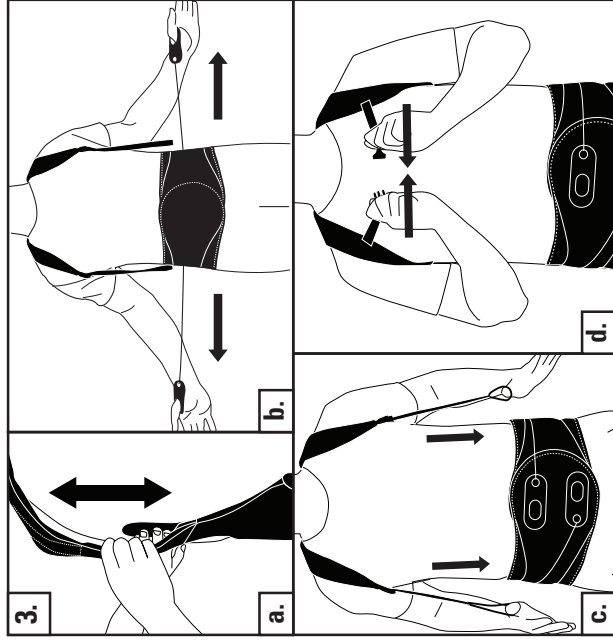

**ENGLISH**  
**TIGHTEN AND ADJUST**  
a. Adjust the vertical height of the posterior adjustment strap so that the yoke rests at C7, or 2" below the shirt collar.  
b. Slip each thumb into the pull tabs. Extend the tabs out and away from the brace. When desired compression is achieved, place the hook side of the pull tabs down onto the loop material to secure.  
c. Pull and tighten the shoulder straps so they fit wide on the shoulders.  
d. Fasten and tighten the chest buckle to secure the shoulder straps.

**ESPAÑOL**  
**CEÑIDO Y AJUSTE**  
a. Ajuste la altura vertical de la correa de ajuste posterior para que la horquilla quede sobre C7, o 5 cm por debajo del cuello de la camisa.  
b. Pase los pulgares por las pestañas de ajuste. Extienda las pestañas hacia fuera, en sentido opuesto a la faja. Una vez alcanzada la compresión deseada, cierre bien la faja presionando ambos lados de la cinta de velcro entre sí.  
c. Hale y ajuste las correas de hombro para que queden separadas en los hombros.  
d. Pase y ajuste la hebilla del pecho para asegurar las correas del hombro.

**DEUTSCH**  
**FESTZIEHEN UND JUSTIEREN**  
a. Die Höhenanpassung des hinteren Einstellriemens so justieren, dass das Joch auf der Höhe von C7 oder 5 cm unterhalb des Kragenbereichs anliegt.  
b. Die Daumen in die Zugleinen stecken. Die Leinen nach außen von der Bandage weg ziehen. Sobald die gewünschte Kompression erzielt ist, die Hakenseite der Zugleinen auf die Klettverschlussschlaufen legen, um die Bandage zu befestigen.  
c. Die Schulterriemen straff ziehen, so dass sie bequem auf den Schultern aufliegen.  
d. Den Brustverschluss schließen und straff ziehen, um den sicheren Sitz der Schulterriemen zu gewährleisten.

**ITALIANO**  
**STRINGERE E REGOLARE**  
a. Regolare l'altezza verticale della cinghietta di regolazione posteriore in modo che la forcina rimanga in corrispondenza della vertebra C7, o 5 cm sotto il collo della camicia.  
b. Infilare ciascun pollice nelle linguette di estensione. Estendere all'infuori le linguette allontanandole dal supporto. Quando si ottiene la compressione desiderata, fissare le linguette di estensione appoggiandole il lato in materiale a uncini sul materiale ad asole.  
c. Tirare e stringere le spalline in modo che rimangano allargate sulle spalle.  
d. Chiudere e stringere la fibbia pettorale per fissare la spalline.

**FRAÇAIS**  
**SERRAGE ET RÉGLAGE**  
a. Ajustez la hauteur verticale de la sangle de réglage postérieure de sorte que la fourche repose au niveau de C7, ou 5 cm sous le col de chemise.  
b. Introduisez vos pouces dans les tirants. Tirez sur les tirants vers l'extérieur en les éloignant de l'orthèse. Une fois la compression souhaitée obtenue, fixez la partie adhésive des tirants sur la bande velcro pour les maintenir en place.  
c. Tirez sur les bretelles et serrez-les de manière à se qu'elles s'ajustent avec aisance sur les épaules.  
d. Attachez et serrez la boucle thoracique pour maintenir les bretelles en position.

**中文**  
**拉紧和调整**  
a. 调整背部调节带的纵向高度，以便使形肩带位于C7位置或衬衣领下方5厘米处。  
b. 将两个大拇指分别伸进拉环内。朝与腰带相反的方向拉动拉环。当达到理想的松紧度时，将拉环的锁握面固定在环扣材料上。  
c. 拉紧肩带，使肩带在肩膀上平展开。  
d. 扣紧胸扣，固定肩带。

**LIMITED WARRANTY**  
Aspen Medical Products, Irvine, CA 92618, warrants to the user who originally purchases this product that it is free from defects in material and workmanship. The sole obligation of Aspen Medical Products in the event of breach of warranty shall be to repair or replace the defective product or parts.  
Aspen Medical Products shall have no obligation under this limited warranty in the event:  
(a) The product is altered, repaired, modified, or used for purposes not intended by Aspen Medical Products or through its authorized channels of distribution;  
(b) The product is altered, repaired, modified, or used for purposes not intended by Aspen Medical Products; or  
(c) Any parts not supplied by Aspen Medical Products are inserted into the product; or  
(d) The product is not used in accordance with the Aspen Medical Products, Instructions for Use.

**READ INSTRUCTIONS BEFORE USE**  
Proper training in the use of this device should take place before use. These instructions are guidelines only and are not offered as medical recommendations.  
THIS PRODUCT IS INTENDED FOR APPLICATION BY LICENSED HEALTH CARE PRACTITIONERS AS DIRECTED BY A PHYSICIAN OR OTHER QUALIFIED MEDICAL AUTHORITY. ASPEN MEDICAL PRODUCTS SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR INJURY OR DAMAGE BY REASON OF ANY APPLICATION OF THIS PRODUCT. PLEASE SEE THE ACCOMPANYING LIMITED WARRANTY FOR FURTHER INFORMATION IN THIS REGARD.  
SEE THE ACCOMPANYING LIMITED WARRANTY FOR FURTHER INFORMATION IN THIS REGARD.

**READ INSTRUCTIONS BEFORE USE**  
Proper training in the use of this device should take place before use. These instructions are guidelines only and are not offered as medical recommendations.  
THIS PRODUCT IS INTENDED FOR APPLICATION BY LICENSED HEALTH CARE PRACTITIONERS AS DIRECTED BY A PHYSICIAN OR OTHER QUALIFIED MEDICAL AUTHORITY. ASPEN MEDICAL PRODUCTS SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR INJURY OR DAMAGE BY REASON OF ANY APPLICATION OF THIS PRODUCT. PLEASE SEE THE ACCOMPANYING LIMITED WARRANTY FOR FURTHER INFORMATION IN THIS REGARD.  
SEE THE ACCOMPANYING LIMITED WARRANTY FOR FURTHER INFORMATION IN THIS REGARD.

**MADE IN CHINA**  
**PATENT PENDING**