



Using your AFO



Attaching the strap

Pull the strap across your leg and into the window on the calf cuff. You should feel the plastic button on the back side of the strap lock into place.



Tightening the strap

Use the Boa® Fit System to dial in the perfect fit. Pull up on the dial to release the strap. Push in and twist to tighten.



Keep your AFO in your shoe

When not using your AFO, it's best to keep it installed in your shoe under the insole. Simply insert your foot and attach the strap next time you wear it.

Other information

Cleaning your AFO

Carbon Fiber / Plastic parts:

- Wipe with a clean, damp cloth

Liner and Strap:

- Hand wash with mild detergent.
- Pat surface dry with towel and leave to air dry completely.
- Do not use bleach, fabric softener, chlorinated water, or tumble dry in a machine dryer.

Videos and accessories

Our website is a great resource to learn more about your Elevate product.

Find videos on how to properly wear your AFO and more. You can also buy extra liners, straps, and Elevate gear!

Learn more:
elevatemovement.com

If you have any issues with your product, please contact the clinician or clinic who performed your initial fitting to start a warranty claim with the Elevate team.

More questions? We're here to help.

Reach out us today or find more info online.

(888) 504-0230

Monday - Friday | 9am-8pm EST

www.elevatemovement.com





Användning av din AFO



Fästa remmen

Dra remmen över benet och in i öppningen på vadmanschetten. Du bör känna hur plastknappen på remmens baksida låses på plats.



Åtdragning av remmen

Använd Boa® Fit System för att justera passformen perfekt. Dra upp ratten för att släppa remmen. Tryck in och vrid för att spänna.



Låt din AFO sitta kvar i skon

När du inte använder din AFO är det bäst att låta den vara kvar i skon under innersulan. Sätt bara i foten och fäst remmen nästa gång du använder den.

Övrig information

Rengöring av din AFO

Kolfiber- / plastdelar:

- Torka av med en ren, fuktig trasa.

Foder och rem:

- Handtvätta med mildt rengöringsmedel.
- Torka av ytan med en handduk och låt lufttorka helt.
- Använd inte blekmedel, sköljmedel, klorerat vatten eller torktumla i maskin.

Videor och tillbehör

Vår webbplats är en utmärkt resurs för att lära dig mer om din Elevate-produkt.

Här hittar du videor om hur du bär din AFO på rätt sätt och mycket mer. Du kan också köpa extra foder, remmar och Elevate-utrustning!

Läs mer:
elevatemovement.com

Om du har några problem med din produkt, vänligen kontakta klinikern eller kliniken som utförde din initiala anpassning för att påbörja ett garantiärende med Elevate-teamet.

Translated by Embreis AB

077-1027-B • Rev 01/23

More questions? We're here to help.

Reach out us today or find more info online.

(888) 504-0230

Monday - Friday | 9am-8pm EST

www.elevatemovement.com





Bruk av din AFO




Feste stroppen

Dra stroppen over benet og inn i åpningen på leggmansjetten. Du skal kunne kjenne at plastknappen på baksiden av stroppen låses på plass.



Stramme stroppen

Bruk Boa® Fit System for å justere passformen perfekt. Trekk opp hjulet for å løsne stroppen. Trykk inn og vri for å stramme.

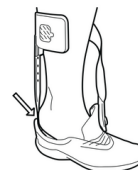

La AFO-en bli igjen i sko

Når du ikke bruker AFO-en, er det best å la den være i sko under innersålen. Sett bare foten inn og fest stroppen neste gang du bruker den.

Annen informasjon

Rengjøring av din AFO

Karbonfiber- / plastdeler:

- Tørk av med en ren, fuktig klut.

Fôr og stropp:

- Håndvask med mildt rengjøringsmiddel.
- Tørk av med et håndkle og la lufttørke helt.
- Ikke bruk blekemiddel, tøymykner, klorvann eller tørketrommel.

Videoer og tilbehør

Vår nettside er en utmerket ressurs for å lære mer om din Elevate-produkt.

Her finner du videoer om hvordan du bruker din AFO på riktig måte og mye mer. Du kan også kjøpe ekstra fôr, stropper og Elevate-utstyr!

Les mer:
elevatemovement.com

Om du har problemer med produktet ditt, vennligst kontakt klinikerens eller klinikken som utførte den første tilpasningen for å starte en garantisak med Elevate-teamet.

Translated by Embreis AB

077-1027-B • Rev 01/23

More questions? We're here to help.

Reach out us today or find more info online.

(888) 504-0230

Monday - Friday | 9am-8pm EST

www.elevatemovement.com





Brug af din AFO



Fastgørelse af stroppen

Træk stroppen over benet og ind i åbningen på lægmanchetten. Du bør kunne mærke, at plastknappen på bagsiden af stroppen låser sig på plads.



Stramning af stroppen

Brug Boa® Fit System til at justere pasformen perfekt. Træk op i drejeknappen for at løsne stroppen. Tryk ind og drej for at stramme.



Lad din AFO blive i sko

Når du ikke bruger din AFO, er det bedst at lade den blive i sko under indersålen. Sæt blot foden i, og fastgør stroppen næste gang, du bruger den.

Øvrig information

Rengøring af din AFO

Kulstof- / plastdele:

- Aftør med en ren, fugtig klud.

Foring og strop:

- Håndvask med mildt rengøringsmiddel.
- Aftør med et håndklæde, og lad lufttørre helt.
- Brug ikke blegemiddel, skyllemiddel, klorvand eller tørretumbler.

Videoer og tilbehør

Vores hjemmeside er en fantastisk ressource til at lære mere om dit Elevate-produkt.

Her finder du videoer om, hvordan du bruger din AFO korrekt, og meget mere. Du kan også købe ekstra foringer, stropper og Elevate-udstyr!

Læs mere:
elevatemovement.com

Hvis du har problemer med dit produkt, bedes du kontakte klinikerne eller klinikken, der foretog den oprindelige tilpasning, for at starte en garantisag med Elevate-teamet.

Translated by Embreis AB

077-1027-B • Rev 01/23

More questions? We're here to help.

Reach out us today or find more info online.

(888) 504-0230

Monday - Friday | 9am-8pm EST

www.elevatemovement.com





AFO:n käyttö



Hihnan kiinnittäminen

Vedä hihna jalan yli ja pohjehihan aukon läpi. Sinun pitäisi tuntea, kuinka muovinen nappi hihnan takapuolella lukittuu paikalleen.



Hihnan kiristäminen

Käytä Boa® Fit System -järjestelmää täydellisen istuvuuden säätämiseen. Vedä kiekko ylös vapauttaaksesi hihnan. Paina sisään ja kierrä kiristääksesi.



Pidä AFO kengässäsi

Kun et käytä AFO-ortoosiasi, on parasta pitää se asennettuna kenkäsi sisäpohjan alle. Aseta vain jalkasi sisään ja kiinnitä hihna seuraavalla käyttökerralla.

Muut tiedot

AFO:n puhdistus

Hiilikuitu- / muoviosat:

- Pyyhi puhtaalla, kostealla liinalla.

Vuori ja hihna:

- Käsinpesu miedolla pesuaineella.
- Kuivaa pinta pyyhkeellä ja anna kuivua täysin ilmassa.
- Älä käytä valkaisuainetta, huuhteluainetta, kloorivettä tai kuivausrumpua.

Videot ja lisävarusteet

Verkkosivustomme on erinomainen tietolähde Elevate-tuotteestasi.

Sieltä löydät videoita AFO:n oikeasta käytöstä ja paljon muuta. Voit myös ostaa lisävuoria, hihnoja ja Elevate-varusteita!

Lue lisää:
elevatemovement.com

Jos sinulla on ongelmia tuotteesi kanssa, ota yhteyttä klinikkaan tai terapeuttiin, joka suoritti alkuperäisen sovituksen, aloittaaksesi takuuasian Elevate-tiimin kanssa.

Translated by Embreis AB

077-1027-B • Rev 01/23

More questions? We're here to help.

Reach out us today or find more info online.

(888) 504-0230

Monday - Friday | 9am-8pm EST

www.elevatemovement.com

