

SLINGSHOT™ 3

UTPROVNINGSINSTRUKTIONER
TILPASNINGINSTRUKTIONER
TILPASSINGSINSTRUKSJONER
SOVITUSOHJEET

SE/NO/DK/FI




BREG, Inc.
2611 Commerce Way
Vista, CA 92081 USA
P:800.321.0607
F:0800.FAX.BREG
www.breg.com
Breg is an Orthofix company






EC REP

E/U authorized representative
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Germany

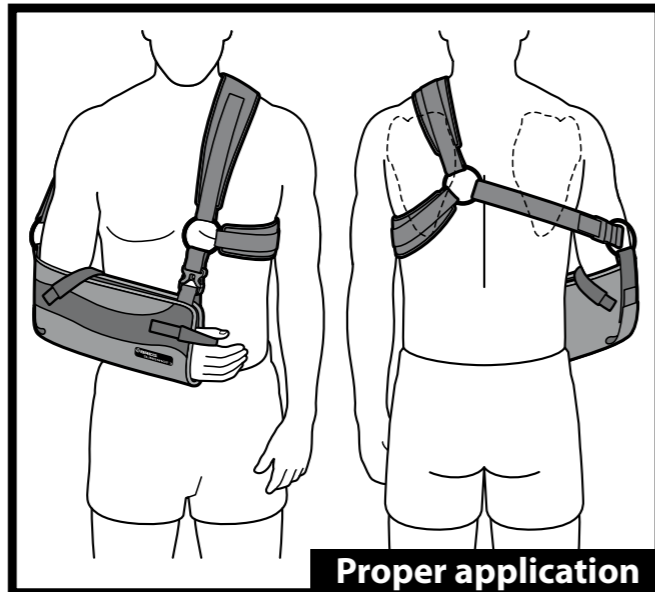

KORREKT APPLICERING AV ORTOSEN
KORREKT APPLIKERING AF ORTOSEN
KORREKT APPLISERING AV ORTOSEN
ORTOOSIN YLLE PUKEMINEN.

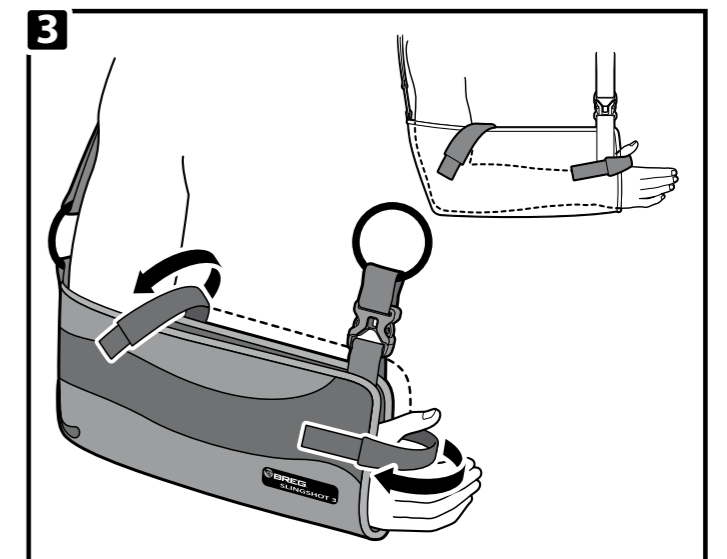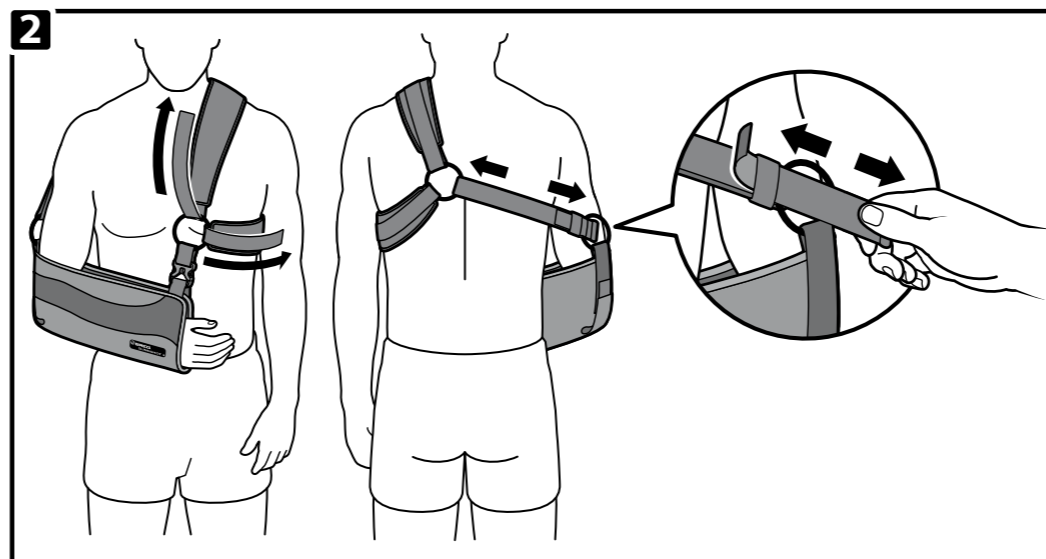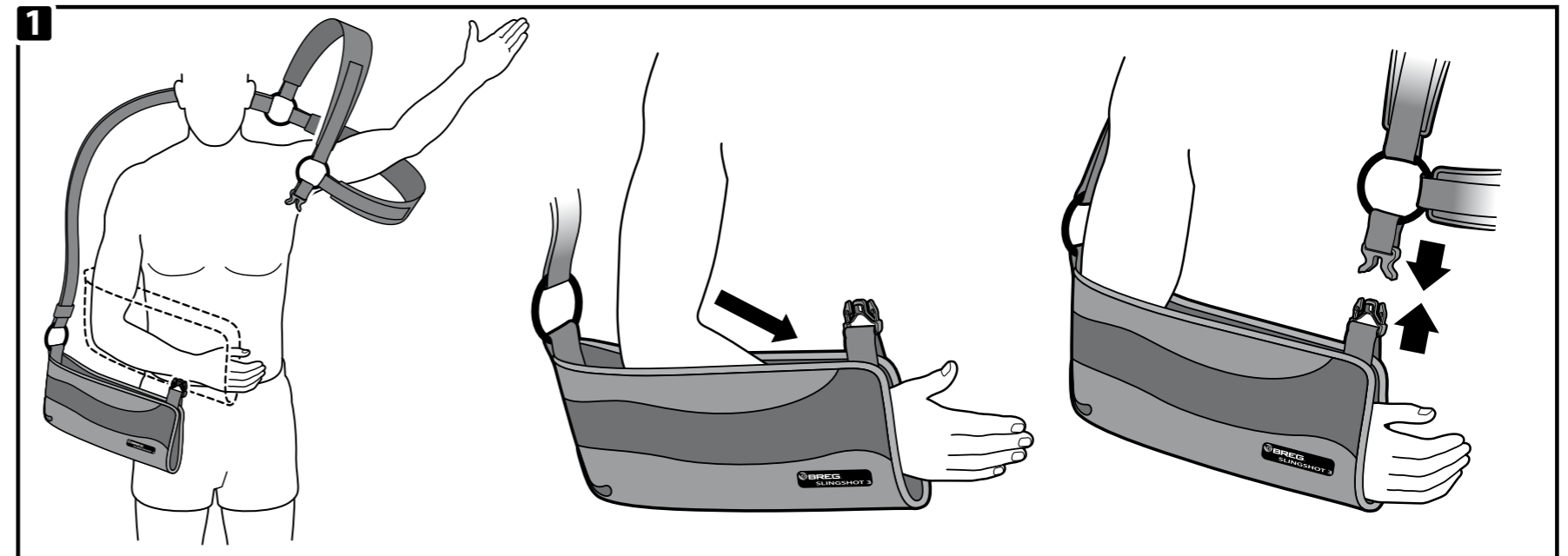

VARNINGAR

FÖRSIKTIGHET: INTERNATIONELLT REGELVERK MEDGER BARA ATT DENNA PRODUKT FÅR SÅLJAS ENLIGT ORDINATION AV BEHÖRIG FÖRSKRIVARE.
FÖRSIKTIGHET: FÅR ENDAST ANVÄNDAS PÅ EN PATIENT.
FÖRSIKTIGHET: OM DINA SMÄRTOR ELLER SVULLNADER ÖKAR ELLER OM DU UPPLIVER ANDRA BESVÅR MEDAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT, SKALL DU OMGÅENDE SÖKA MEDICINSK VÅRD.
VARNING: LÄS ANVISNINGARNA OCH VARNINGAR NOGA FÖRE ANVÄNDNING.
VARNING: DENNA PRODUKT KAN INTE FÖRHINDRA ELLER LINDRA ALLA SKADOR. LÄMPLIG REHABILITERING OCH AKTIVITETSMODIFIERING ÄR OCKSÅ VIKTIGA KOMPLEMENT I ETT SÄKERT BEHANDLINGSPROGRAM.

ADVARSLER

FÖRSIKTIGHED: INTERNATIONALE REGLER FØRESKRIVER AT DETTE PRODUKT UDELUKKENDE MÅ SÆLGES I HENHOLD TIL ORDINATION AF FAGUDDANNET SUNDHEDSSPERSONALE.
FORSIKTIGHED: MÅ UDELUKKENDE ANVENDES AF EN PATIENT.
FORSIKTIGHED: HVIS DINE SMERTER ELLER HÆVELSE ØGES ELLER HVIS DU OPLEVER ANDRE PROBLEMER MENS DU ANVENDER ORTOSEN, SKAL DU OMGÅENDE SØGE MEDICINSK VEJLEDNING.
ADVARSEL: LÆS ANVISNINGERNE OG ADVARSLERNE NØJE INDEN ANVENDELSE.
ADVARSEL: DETTE PRODUKT KAN IKKE FORHINDRE ELLER LINDRE ALLE SKADER. EGNET REHABILITERING OG AKTIVITETSMODIFISERING ER OGSÅ VIKTIGE KOMPLEMENTER I ET SIKKERT BEHANDLINGSPROGRAM.


ADVARSLER

FORSIKTIGHET: INTERNASJONALT REGELVERK TILLATER KUN AT DETTE PRODUKTET FÅR SELGES ETTER ORDINASJON AV FAGKYNDIG HELSEPERSONALE.
FORSIKTIGHET: MÅ KUN BRUKES PÅ EN PASIENT.
FORSIKTIGHET: OM SMERTENE ELLER HEVELSENE DINE ØKER ELLER OM DU OPPLIVER ANDRE PROBLEMER VED BRUK AV DETTE PRODUKTET, SKAL DU OMGÅENDE TA KONTAKT MED UTPØVEREN.
ADVARSEL: LES ANVISNINGENE OG ADVARSLER NØYE FØR BRUK.
ADVARSEL: DETTE PRODUKTET KAN IKKE FORHINDRE ELLER LINDRE ALLE SKADER. VELEGNET REHABILITERING OG AKTIVITETSMODIFISERING ER OGSÅ VIKTIGE KOMPLEMENTER I ET SIKKERT BEHANDLINGSPROGRAM.

VAROITUKSET


HUOMIO: KANSAINVÄLINEN TUOTEVALVONTAKESKUS MYÖNTÄÄ TÄTÄ TUOTETTA MYYTÄVÄKSI AINOASTAAN AMMATTIHENKILÖKUNNAN VÄLITYKSELLÄ.
HUOMIO: TUOTE ON TÄRKEITÄ YKSILÖLLISEEN KÄYTTÖÖN.
HUOMIO: JOS KIPU TAI TURVOTUS LISÄÄNTYY TAI MUITA OIREITA ILMENEE TUOTETTA KÄYTETTÄESSÄ TULEE VASTAAN HOITOHENKILÖKUNTAAN HETI OTTAA YHTEYTTÄ.
VAROITUS: LUE KÄYTTÖOHJEET JA VAROITUKSET HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA.
VAROITUS: TUOTE EI ENNALTAEHKÄISE TAI VÄHENNÄ KAIKKIA VAMMOJA. OIKEANLAINEN KUNTOUTUSOHJELMA ON MYÖS TÄRKEÄ OSA HOITOA.

To relieve elbow pressure

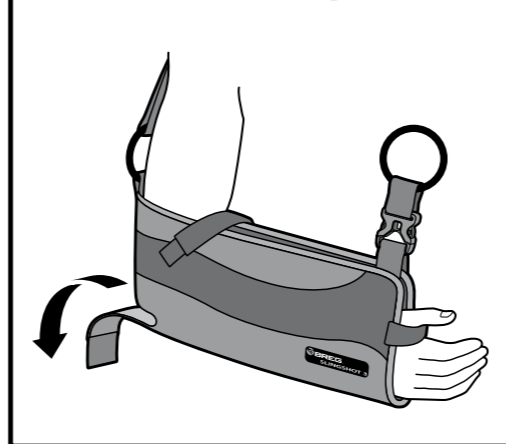


För att avlasta armbågen
For at aflaste albuen.
For å avlaste albuen
Kynnärpään kohdistuvan rasituksen lievittäminen

To remove

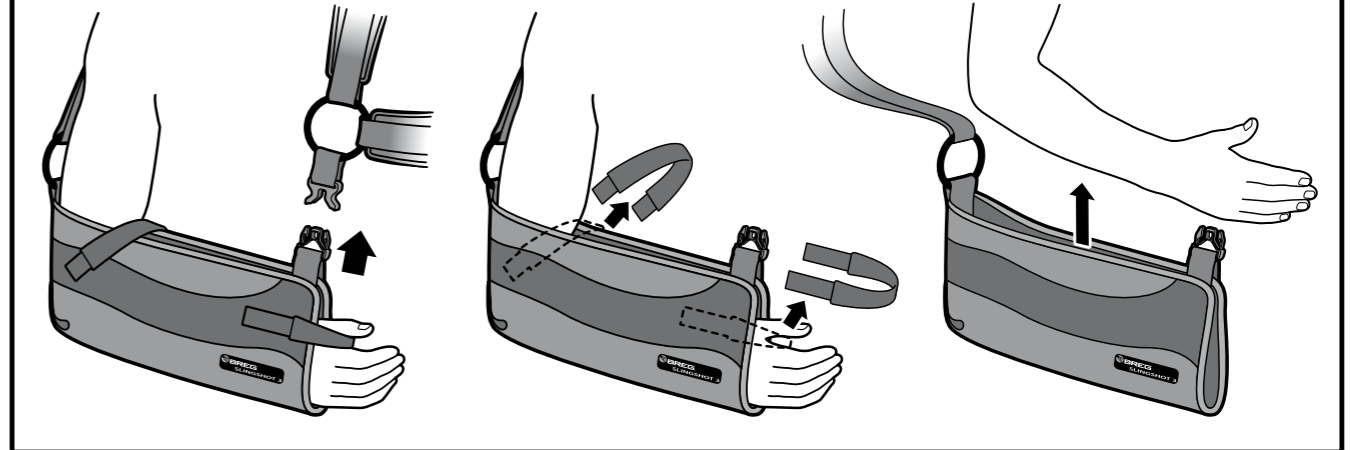

Avlägsna ortosen
For at tage ortosen af.
Ta av ortosen
Ortoosin riisuminen

Applying the abduction pillow*

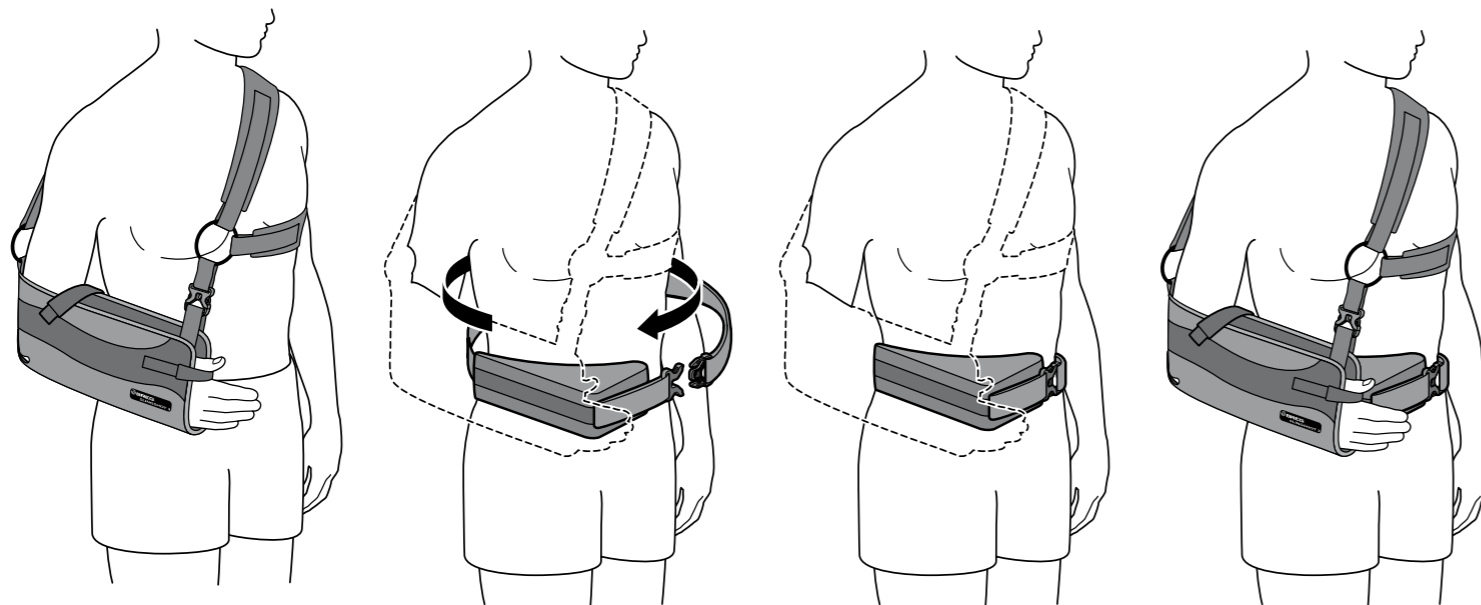


*Abduction pillow configuration should be determined by clinician

Applicering av abduktionskudde*
 Applikering af abduktionspude*
 Applisering av abduksjonsputen*
 Abduktiotyynyn lisääminen*


*SAMMANSSÄTTNINGEN/FORMEN PÅ ABDUKTIONSKUDDEN SKALL
 BESTÄMMAS AV ORDINERANDE MEDICINSK PERSONAL.
 * SAMMENSETTINGEN/FORMEN PÅ ABDUKSJONSPUTEN SKAL
 BESTEMMES AV ORDINERENDE MEDISINSK PERSONALE.
 * ABDUKTIOTYYNYN KOKOONPANOSTA VASTAA HOITOHENKILÖKUNTA

Applying the exercise ball

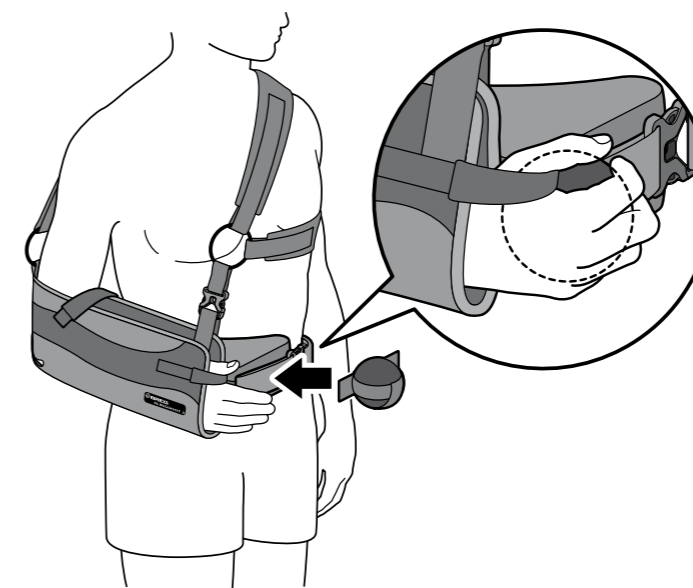

Applicering av träningsboll
 Applikering af træningsbold.
 Applisering av treningsball
 Harjoituspallo lisääminen

Abduction pillow configurations:

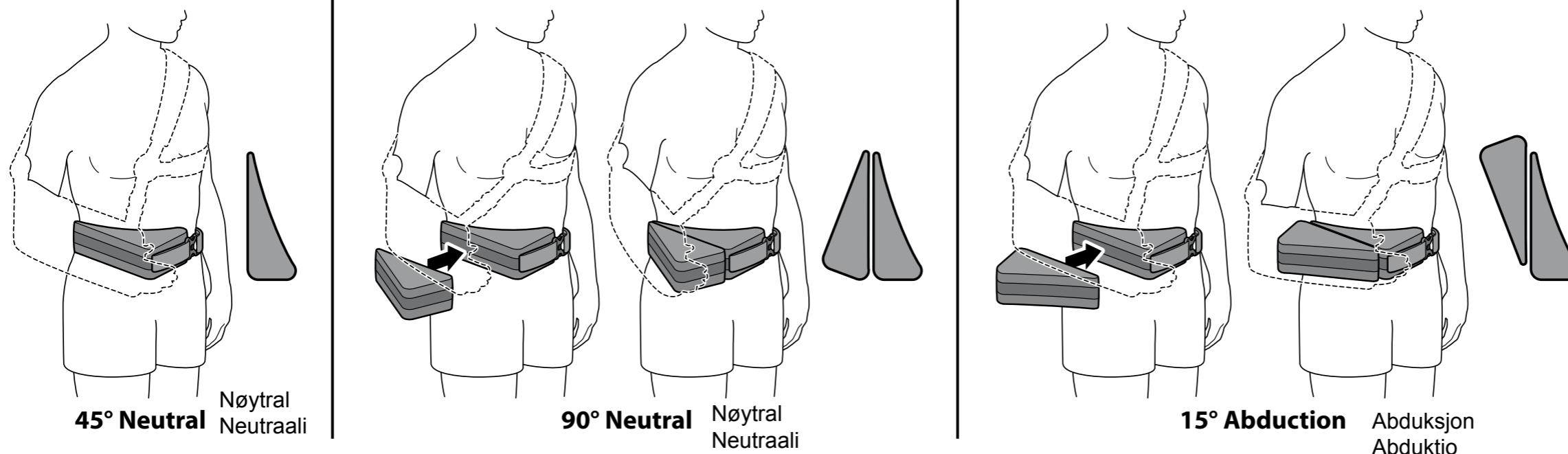

45° Neutral Nøytral
 Neutraali

90° Neutral Nøytral
 Neutraali

15° Abduction Abduksjon
 Abduktio

Sammansettning av Abduktionskudden
 Sammensætning af abduktionspuden.
 Sammensetning av Abduksjonsputen
 Abduktiotyynyn kokoonpano