



step

Instructions for use
(IFU)








Contents

	Sizes table	2
EN	Instructions for use	6
SE	Bruksanvisning	7
NO	Bruksanvisning	8
DK	Brugsanvisning	9
FI	Käyttöohje	11

Size table

	US M	US W	1	2
SA	2.5 - 4	4 - 5.5	10" - 12.5"	3" - 3.5"
S	4 - 6	5.5 - 7.5	10" - 12"	3.25" - 4"
MA	5 - 8.5	6.5 - 10	11.5" - 14"	3" - 3.75"
M	6 - 9.5	7.5 - 11	11" - 13.5"	3.5" - 4.25"
LA	8 - 11.5	9.5 - 13	13" - 16"	3.25" - 4"
L	9 - 12	10.5 - 13.5	12.5" - 15.5"	3.75" - 4.5"
XL	11.5 +	13 +	14.5" +	4.25" +

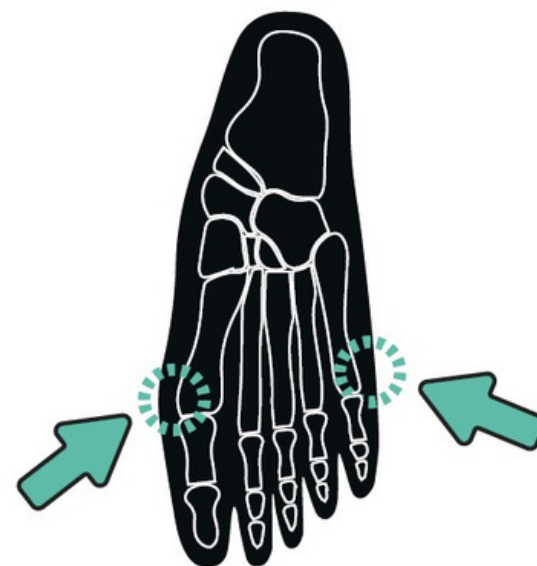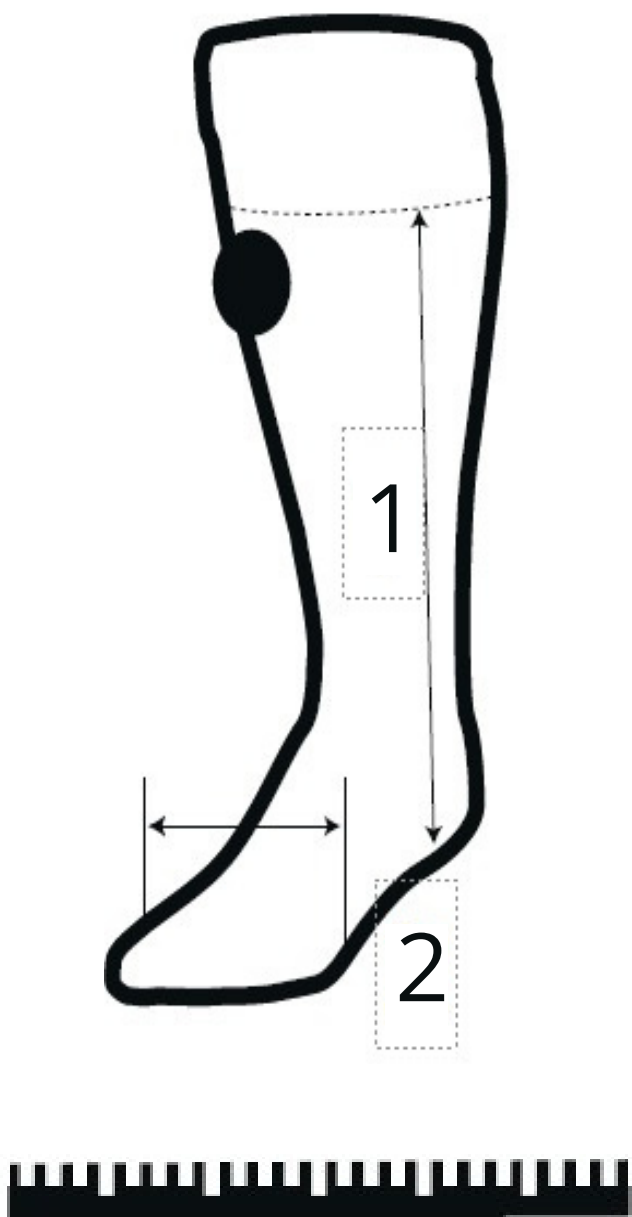

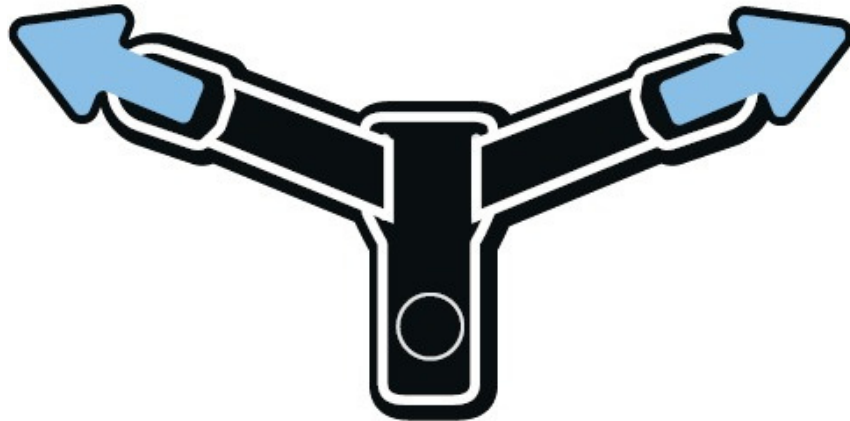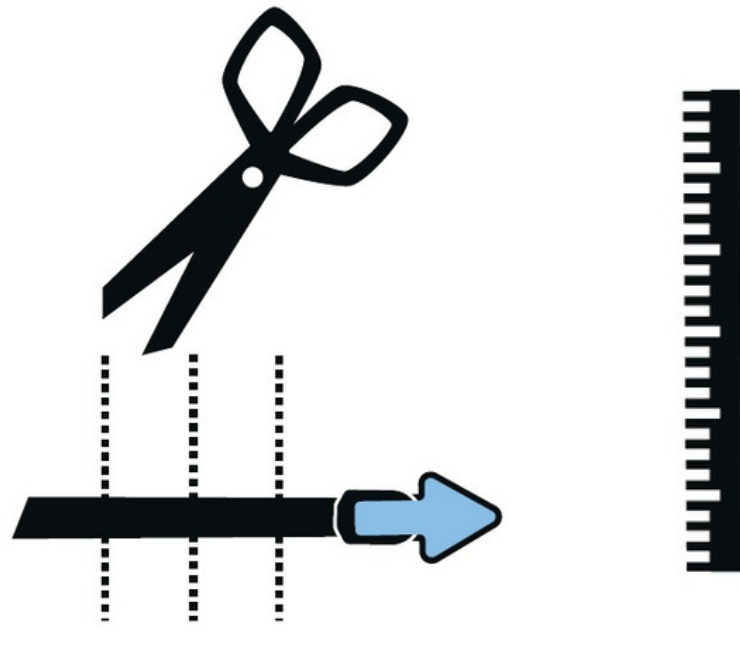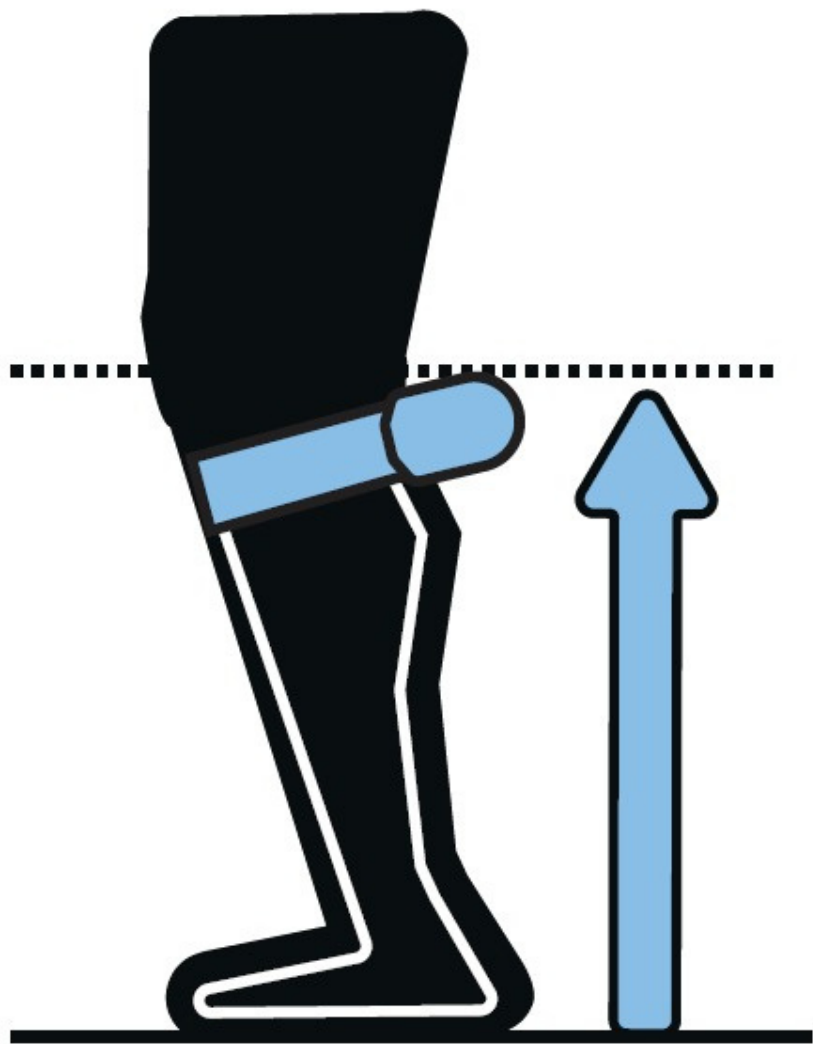



Product Overview - English

Intended use

The Sstep is to be used exclusively for orthotic fittings of the foot and ankle and is exclusively suitable for contact with healthy and intact skin.

Indications and Effects

The Sstep supports the foot in case of drop foot with no more than mild spasticity, e.g. after stroke, traumatic brain injury, multiple sclerosis, neural muscle atrophy, peroneal palsy etc.

The Sstep is best suited for patients with:

- No or mild impairment of motor knee control
- No or mild impairment of plantar flexors
- Ambulatory patients, walking indoors as well as outdoors

In case of foot deformity, the product is indicated when the foot deformity can be corrected through use of an additional insole and/or a varus/valgus support strap in combination with a sturdy shoe. The product provides the user with a more natural gait pattern, a faster and more stable walk. The toes and foot are lifted up during the swing phase and foot slap and heel strike is prevented.

Contraindications

- Contractures
- Moderate to severe spasticity in the lower leg
- Any ulcers of the lower limb
- Severe edema
- Moderate to severe foot deformities

In case of the following indications, consultation with a physician is required: Skin diseases / injuries, inflammatory symptoms, prominent scars, lymphatic disorders, sensory and circulatory disorders of the lower extremities.

Safety

- The patient must be instructed in the proper use/care of the product by reading IFUs carefully
- The daily duration of use and period of application are dependent on the medical indication and comfort level of the user
- The product is intended for use on one patient only
- If the orthosis is applied too tight, it can cause local pressure and, in some cases even restrict blood flow or nerves. Do not apply it too tight.
- Consult a physician immediately if you experience unusual changes, such as increase in pain
- The ability to drive a vehicle when wearing the product should be determined on a case-by-case basis
- This product is not flame-resistant. Keep the product away from flames or other heat sources
- The product should not come into contact with grease or acidic agents, unguents and lotion. This may reduce the product's useful life
- This product is not made with natural rubber latex
- Use of this product is not a guarantee against injury

Warranty

60-Day Limited Warranty

We stand behind the quality of our products. Our products are warranted to be free from manufacturing defects in materials and workmanship for 60 days from the date of purchase. This warranty is valid only for the original purchaser and is not transferable.

Warranty Registration

To qualify for the 60-Day Limited Warranty, you must register your product within 30 days of purchase on: www.dropfoot.com/warranty.

Warranty Claims

If you experience a manufacturing defect within the warranty period, please contact our customer service team at hello@elevatemovement.com with your registered information and a description of the issue. We will provide instructions on how to return the defective product for inspection and replacement or refund.

Exclusions

This warranty does not cover:

- Normal wear and tear
- Damage caused by improper use, misuse, or neglect
- Products that have been altered or modified
- Products not purchased from our website or authorized retailers

Limitations

Our liability is limited to the replacement or refund of the defective product. We are not responsible for any incidental or consequential damages resulting from the use of our products.

Legal Rights

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or country to country.

Produktöversikt - Svenska

Avsett användningsområde

Sstep är avsedd att användas uteslutande för ortosutprovning av fot och fotled och är endast lämplig för kontakt med frisk och intakt hud.

Indikationer och effekt

Sstep stödjer foten vid droppfot med högst mild spasticitet, t.ex. efter stroke, traumatisk hjärnskada, multipel skleros, neurogen muskelatrofi, peroneuspares etc.

Sstep är särskilt lämplig för patienter med:

- Ingen eller mild nedsättning av motorisk knäkontroll
- Ingen eller mild nedsättning av plantarflektorerna
- Gångförmåga, både inomhus och utomhus

Vid fotdeformitet är produkten indikerad när fotdeformiteten kan korrigeras genom användning av en extra innersula och/eller ett varus-/valgusstöd i kombination med en stabil sko. Produkten bidrar till ett mer naturligt gångmönster, en snabbare och mer stabil gång. Under svingfasen lyfts tår och fot upp, vilket förhindrar fotklapp och en okontrollerad hälisättning.

Kontraindikationer

- Kontrakturer
- Måttlig till svår spasticitet i underbenet
- Sår på nedre extremiteten
- Svår ödem
- Måttliga till svåra fotdeformiteter

Vid följande tillstånd krävs konsultation med läkare, hudsjukdomar/skador, inflammatoriska symtom, framträdande ärr, lymfatiska störningar, samt sensoriska och cirkulatoriska störningar i nedre extremiteterna.

Säkerhet

- Patienten ska instrueras i korrekt användning och skötsel av produkten genom att noggrant läsa bruksanvisningen.
- Den dagliga användningstiden och behandlingens längd beror på den medicinska indikationen och användarens komfortnivå.
- Produkten är avsedd för användning av en enda patient.
- Om ortosen appliceras för hårt kan det orsaka lokalt tryck och i vissa fall även begränsa blodflödet eller påverka nerver. Applicera den därför inte för hårt.
- Kontakta omedelbart läkare vid ovanliga förändringar, såsom ökad smärta.
- Förmågan att köra fordon vid användning av produkten bör bedömas individuellt.
- Produkten är inte flamsäker. Håll den borta från öppen eld och andra värmekällor.
- Produkten bör inte komma i kontakt med fett, sura ämnen, salvor eller lotioner, då detta kan förkorta produktens livslängd.
- Produkten innehåller inte naturgummilatex.
- Användning av denna produkt garanterar inte att skador förhindras.

Garanti

60-dagars begränsad garanti

Vi står bakom kvaliteten på våra produkter. Våra produkter är garanterade att vara fria från tillverkningsfel i material och utförande i 60 dagar från inköpsdatum. Garantin gäller endast för den ursprungliga köparen och är inte överlåtbar.

Garantiregistrering

För att kvalificera dig för den 60-dagars begränsade garantin måste du registrera din produkt inom 30 dagar från inköpsdatum på: www.dropfoot.com/warranty.

Garantikrav

Om du upplever ett tillverkningsfel under garantiperioden, vänligen kontakta vår kundtjänst på hello@elevatemovement.com med dina registrerade uppgifter och en beskrivning av problemet. Vi kommer att ge instruktioner om hur du returnerar den defekta produkten för inspektion och byte eller återbetalning.

Undantag

Denna garanti täcker inte:

- Normalt slitage
- Skador orsakade av felaktig användning, missbruk eller försummelse
- Produkter som har ändrats eller modifierats
- Produkter som inte har köpts från vår webbplats eller auktoriserade återförsäljare

Begränsningar

Vårt ansvar är begränsat till att ersätta eller återbetala den defekta produkten. Vi ansvarar inte för indirekta eller följdskador som uppstår vid användning av våra produkter.

Lagliga rättigheter

Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar beroende på delstat eller land.

Produktoversikt - Norsk

Tilsiktet bruksområde

Sstep er utelukkende ment for ortoseutprøving av fot og ankel og er kun egnet for kontakt med frisk og intakt hud.

Indikasjoner og effekt

Sstep støtter foten ved droppfot med høyest mild spastisitet, for eksempel etter hjerneslag, traumatisk hjerneskade, multippel sklerose, nevrogen muskelatrofi, peroneusparese osv.

Sstep er spesielt egnet for pasienter med:

- Ingen eller mild svekkelse av motorisk kne-kontroll
- Ingen eller mild svekkelse av plantarfleksorene
- Gangfunksjon, både innendørs og utendørs

Ved fotdeformitet er produktet indisert når fotdeformiteten kan korrigeres ved bruk av en ekstra innleggssåle og/eller en varus-/valgusstøtte i kombinasjon med en stabil sko. Produktet bidrar til et mer naturlig gangmønster, en raskere og mer stabil gange. Under svingfasen løftes tær og fot opp, noe som forhindrer fotklapping og ukontrollert hælsett.

Kontraindikasjoner

- Kontrakturer
- Moderat til alvorlig spastisitet i underbenet
- Sår på underekstremiteten
- Alvorlig ødem
- Moderat til alvorlige fotdeformiteter

Ved følgende tilstander kreves konsultasjon med lege: hudsykdommer/-skader, inflammatoriske symptomer, fremtredende arr, lymfatiske forstyrrelser samt sensoriske og sirkulatoriske forstyrrelser i underekstremitetene.

Sikkerhet

- Pasienten skal instrueres i korrekt bruk og vedlikehold av produktet ved å lese bruksanvisningen nøye.
- Dersom ortosen påføres for stramt, kan dette føre til lokalt trykk og i enkelte tilfeller begrense blodstrømmen eller påvirke nerver. Påfør den derfor ikke for stramt.
- Kontakt lege umiddelbart ved uvanlige endringer, for eksempel økt smerte.
- Evnen til å kjøre kjøretøy ved bruk av produktet bør vurderes individuelt.
- Produktet er ikke flammehemmende. Hold det borte fra åpen ild og andre varmekilder.
- Produktet bør ikke komme i kontakt med fett, sure stoffer, salver eller kremer, da dette kan forkorte produktets levetid.
- Produktet inneholder ikke naturgummilateks.
- Bruk av dette produktet garanterer ikke at skader forhindres.

Garanti

60-dagers begrenset garanti

Vi står bak kvaliteten på våre produkter. Våre produkter er garantert å være fri for produksjonsfeil i materialer og utførelse i 60 dager fra kjøpsdato. Garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen og er ikke overførbar.

Garantiregistrering

For å kvalifisere deg for den 60-dagers begrensede garantien, må du registrere produktet ditt innen 30 dager fra kjøpsdato på: www.dropfoot.com/warranty.

Garantikrav

Dersom du oppdager en produksjonsfeil i løpet av garantiperioden, vennligst kontakt vår kundeservice på hello@elevatemovement.com med dine registrerte opplysninger og en beskrivelse av problemet. Vi vil gi deg instruksjoner om hvordan du returnerer det defekte produktet for inspeksjon og enten bytte eller refusjon.

Unntak

Denne garantien dekker ikke:

- Normalt slitasje
- Skader forårsaket av feilaktig bruk, misbruk eller forsømmelse
- Produkter som har blitt endret eller modifisert
- Produkter som ikke er kjøpt fra vår nettside eller autoriserte forhandlere

Begrensninger

Vårt ansvar er begrenset til å erstatte eller refundere det defekte produktet. Vi er ikke ansvarlige for indirekte skader eller følgeskader som oppstår ved bruk av våre produkter.

Juridiske rettigheter

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer avhengig av delstat eller land.

Product Overview - Dansk

Tilsigtet brug

Sstep er udelukkende beregnet til ortoseafprøvning af foden og anklen og er kun egnet til kontakt med sund og intakt hud.

Indikationer og effekt

Sstep støtter foden ved dropfod med højst mild spasticitet, f.eks. efter slagtilfælde, traumatisk hjerneskade, multipel sklerose, neural muskelatrofi, peroneal parese osv.

Sstep er bedst egnet til patienter med:

- Ingen eller mild nedsættelse af motorisk knækontrol
- Ingen eller mild nedsættelse af plantar fleksorer
- Ambulante patienter, der går både indendørs og udendørs

Ved foddeformitet er produktet indiceret, når foddeformiteten kan korrigeres ved brug af en ekstra indlægssål og/eller en varus/valgus-støttestropp i kombination med en stabil sko. Produktet giver brugeren et mere naturligt gangmønster, en hurtigere og mere stabil gang. Tæer og fod løftes op under svingfasen, og fodklap samt hård hælissetning forhindres.

Kontraindikationer

- Kontrakturer
- Moderat til svær spasticitet i underbenet
- Eventuelle sår på underekstremiteterne
- Svær ødem
- Moderate til svære foddeformiteter

Ved følgende indikationer kræves konsultation med en læge: Hudsygdomme/skader, inflammatoriske symptomer, fremtrædende ar, lymfatiske lidelser, sensoriske og kredsløbsmæssige forstyrrelser i underekstremiteterne.

Sikkerhe

- Patienten skal instrueres i korrekt brug og vedligeholdelse af produktet ved at læse brugsanvisningen omhyggeligt.
- Den daglige brugstid og anvendelsesperiode afhænger af den medicinske indikation og brugerens komfortniveau.
- Produktet er kun beregnet til brug af én enkelt patient.
- Hvis ortosen påføres for stramt, kan det medføre lokalt tryk og i nogle tilfælde begrænse blodgennemstrømningen eller påvirke nerver. Anvend den derfor ikke for stramt.
- Kontakt straks en læge, hvis der opstår usædvanlige ændringer, såsom øget smerte.
- Evnen til at køre bil med produktet på bør vurderes individuelt.
- Produktet er ikke flammehæmmende. Hold det væk fra åben ild og andre varmekilder.
- Produktet bør ikke komme i kontakt med fedtstoffer, sure stoffer, salver eller lotion, da dette kan forkorte produktets levetid.
- Produktet indeholder ikke naturgummilateks.
- Brug af dette produkt garanterer ikke beskyttelse mod skader.

Garanti

60-dages begrænset garanti

Vi står inde for kvaliteten af vores produkter. Vores produkter er garanteret at være fri for fabrikationsfejl i materialer og håndværk i 60 dage fra købsdatoen. Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber og kan ikke overdrages.

Garantiregistrering

For at være berettiget til den 60-dages begrænsede garanti, skal du registrere dit produkt inden for 30 dage efter købet på:

www.dropfoot.com/warranty

Garantikrav

Hvis du oplever en fabrikationsfejl inden for garantiperioden, bedes du kontakte vores kundeservice på hello@elevatemovement.com med dine registrerede oplysninger og en beskrivelse af problemet. Vi vil give dig instruktioner om, hvordan du returnerer det defekte produkt til inspektion og enten ombytning eller refusion.

Undtagelser

Denne garanti dækker ikke:

- Almindeligt slid
- Skader forårsaget af forkert brug, misbrug eller forsømmelse
- Produkter, der er ændret eller modificeret
- Produkter, der ikke er købt fra vores hjemmeside eller autoriserede forhandlere

Begrænsninger

Vores ansvar er begrænset til ombytning eller refusion af det defekte produkt. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle indirekte eller følgeskader, der måtte opstå ved brug af vores produkter.

Juridiske rettigheder

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat eller land til land.

Tuotekatsaus - Suomi

Tarkoitettu käyttö

Sstep on tarkoitettu yksinomaan jalkaterän ja nilkan ortoottisiin sovituksiin, ja se soveltuu vain terveelle ja ehjälle iholle.

Indikaatiot ja vaikutukset

Sstep tukee jalkaa riippujalassa, kun spastisuus on enintään lievää, esimerkiksi aivohalvauksen, traumaattisen aivovamman, multippeliskleroosin, hermoston lihasatrofian, peroneuspareesin jne. jälkeen.

Sstep soveltuu parhaiten potilaille, joilla on:

- Ei lainkaan tai vain lievä motorisen polvikontrollin heikkeneminen
- Ei lainkaan tai vain lievä plantaarifleksorien heikkeneminen
- Kävelykyky, sekä sisällä että ulkona

Ilos potilaalla on jalkaterän virheasento, tuote on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun virheasento voidaan korjata lisäpohjallisella ja/tai varus-/valgus-tukihihnalla yhdessä tukevan kengän kanssa. Tuote auttaa käyttäjää saavuttamaan luonnollisemman askelluskuvion sekä nopeamman ja vakaamman kävelyn. Keinuvaiheessa varpaat ja jalkaterä nousevat ylös, mikä estää jalkaterän läpsähtämisen ja hallitsemattoman kantauskun.

Vasta-aiheet

- Kontraktuurat
- Kohtalainen tai vaikea spastisuus alaraajassa
- Haavaumat alaraajoissa
- Vaikea turvotus (edeema)
- Kohtalaiset tai vaikeat jalkaterän virheasennot

Seuraavissa tapauksissa lääkärin konsultaatio on tarpeen: ihosairaudet/-vammat, tulehdukselliset oireet, näkyvät arvet, imusuoniston häiriöt, sekä alaraajojen tunto- ja verenkiertohäiriöt.

Turvallisuus

- Potilasta on ohjeistettava tuotteen oikeasta käytöstä ja huollosta lukemalla käyttöohjeet huolellisesti.
- Päivittäinen käyttöaika ja hoidon kesto riippuvat lääketieteellisestä indikaatiosta ja käyttäjän mukavuustasosta.
- Tuote on tarkoitettu vain yhden potilaan käyttöön.
- Jos ortoosi asetetaan liian tiukasti, se voi aiheuttaa paikallista painetta ja joissain tapauksissa rajoittaa verenkiertoa tai vaikuttaa hermoihin. Älä kiristä sitä liikaa.
- Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos koet epätavallisia muutoksia, kuten lisääntynyttä kipua.
- Tuotteen vaikutus ajokykyyn tulee arvioida tapauskohtaisesti.
- Tämä tuote ei ole palosuojattu. Pidä se poissa avotulesta ja muista lämmönlähteistä.
- Tuote ei saa joutua kosketuksiin rasvojen, happamien aineiden, voiteiden tai linimenttien kanssa, sillä ne voivat lyhentää tuotteen käyttöikää.
- Tämä tuote ei sisällä luonnonkumilateksia.
- Tuotteen käyttö ei takaa loukkaantumisten ehkäisyä.

Takuu

60 päivän rajoitettu takuu

Olemme sitoutuneet tuotteidemme laatuun. Tuotteemme ovat takuun alaisia valmistusvirheiden ja materiaalivirheiden osalta 60 päivän ajan ostopäivästä lähtien. Tämä takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa, eikä sitä voi siirtää eteenpäin.

Takuurekisteröinti

Jotta voit hyödyntää 60 päivän rajoitetun takuun, sinun on rekisteröitävä tuotteesi 30 päivän kuluessa ostopäivästä osoitteessa: www.dropfoot.com/warranty.

Takuun piiriin kuuluvat vaatimukset

Jos havaitset tuotannollisen virheen takuuajan aikana, ota yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse hello@elevatemovement.com ja ilmoita rekisteröintitietosi sekä kuvaus ongelmasta. Saat ohjeet viallisen tuotteen palauttamiseen tarkastusta varten, jonka jälkeen tuote vaihdetaan uuteen tai maksu palautetaan.

Poikkeukset

Tämä takuu ei kata:

- Normaalialue kulumista
- Vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, väärinkäytöstä tai laiminlyönnistä
- Muokattuja tai muutettuja tuotteita
- Tuotteita, joita ei ole ostettu verkkosivustoltamme tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä

Rajoitukset

Vastuamme rajoittuu viallisen tuotteen vaihtamiseen tai hyvittämiseen. Emme vastaa välillisistä tai seurannaisvahingoista, jotka voivat johtua tuotteidemme käytöstä.

Lakisääteiset oikeudet

Tämä takuu antaa sinulle tietyt lakisääteiset oikeudet, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioista tai maasta riippuen.