




Nacke



◀ ICU backstycke används främst till nedsövda eller sängliggande patienter för att motverka trycksår. Kan användas till alla Aspens cervikala ortoser.

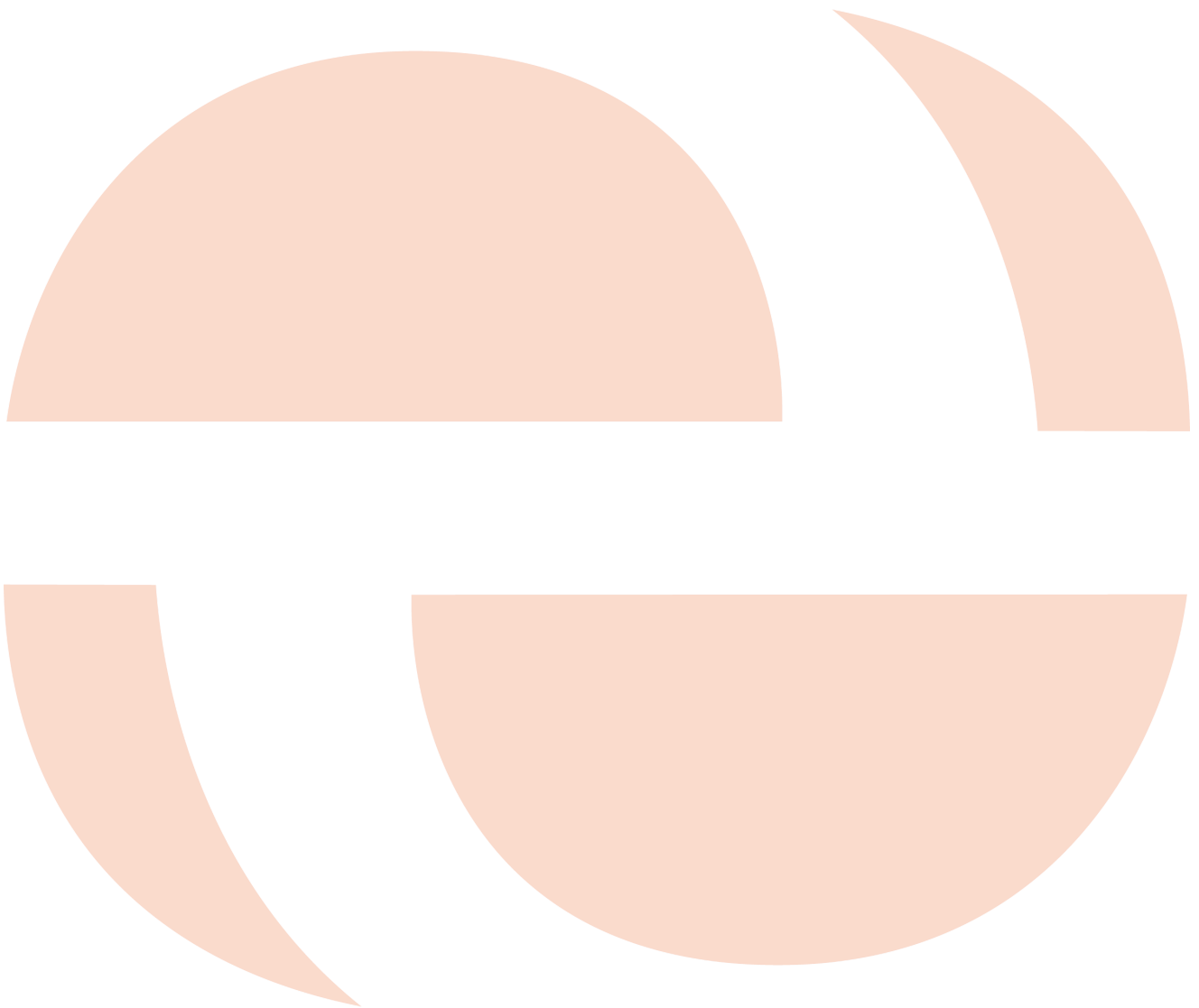

Instruktionsvideo
Vista Halskrage

▲ Skanna QR-koden med din smartphone för att se video. (För att skanna koden måste du ha en QR-läsare, detta laddar du ner ifrån App Store, Android market eller motsvarande app-resurs för din mobila enhet.)

Vista Halskrage

Vista halskrage är ställbar i höjddled och ger sex halskrage i en och samma modell. Kragen är utvecklad för långtidsanvändning och ger brukaren mycket god komfort. Utformningen vid käkar, bröstben och occipital benet avlastar oönskat tryck och motverkar trycksår. Den stora tracheotomi öppningen förenklar användande av trakealkanyl och ger samtidigt god ventilation. Det bomullsklädda skumfodret tar effektivt upp fukt och håller huden torr. Fodret kan enkelt bytas och tvättas för att bibehålla god hygien. För mer information se instruktionsvideo. Vista kragen kan enkelt uppgraderas till en Vista CTO ortos för ökad stabilitet.

Material: HDPE polyetylen, bomull, foam

Funktioner

- Ställbar i sex höjder
- Mycket god komfort
- Utbytbara foder
- Separat fram och bakstycke
- Fodret suger upp fukt och svett
- Kragens design motverkar trycksår
- Flexibla "Flex Tabs"
- Kan uppgraderas till Vista CTO
- MR kompatibel

6 storlekar i en krage

Indikationer

- Cervikal stabilisering i nivå C1-C7
- Akuta skador
- Postoperativ stabilisering
- Degenerativa förändringar
- Övriga fall där cervikal stabilisering krävs

Färg:

Art.nr.	Storlek
984000	Universal

Art.nr.	Tillbehör till Vista Halskrage
984020	Foamset Vista Halskrage
984008	Bakstycke Vista Halskrage, Large
984600	Vista ICU Bakstycke
984620	Foamset Vista ICU Bakstycke
984504	Upgrade-kit Vista CTO

Nacke



Vista CTO Upgrade-kit

Med ett Upgrade-Kit Vista CTO kan du uppgradera de olika modellerna av Vista halskrage till en Cervikal Thorakal Ortos. Ortosen är MR kompatibel och setet innehåller alla delar förutom halskragen.

Funktioner

- 6 Ställbara höjder av kragen
- Ställbar bröstdel
- MR kompatibel
- Separat fram och bakstycke
- Stor tracheotomi öppning
- Tvättbara och utbytbara foder

Art.nr

984504

Rygg



▲ Justerbar i sidled.



▲ Enkel och säker låsme-
kanism.

Tecnoway T35BS

Tecnoway T35BS är en stabil 3-punktsortos och används efter skada eller operation av ryggen. Den ger en fast extension och fixering vilket effektivt förhindrar flexion och rotation av länd- och bröstrygg. Ortosen kan anpassas och justeras individuellt i höjd och bredd över bröstet. Sidospannet är enkelt att justera, öppna och stänga. Höftdelen är lätt rörlig vilket förenklar sittande, och kan låsas vid behov.

Material: Aluminium, plast, nylon.

Funktioner

- Stabil 3-punkts ortos
- Effektiv fixering av rygg
- Förhindrar flexion
- Förhindrar rotation
- Justerbar höjd och bröstvidd
- Enkelt och säkert ryggspänne
- Rörlig höftdel förenklar sittande
- Fri från Latex, Nickel



Indikationer

- Stabila lumbala och thorakala frakturer
- Stabila kompressionsfrakturer
- Preoperativ och postoperativ stabilisering
- Övrig lumbo-thorakal stabilisering

Färg: ☐

Art.nr.	Storlek	Höftmått (A)	Höjd (B) *
T35BS/XS	X-Small	50 - 60 cm	36 - 40 cm
T35BS/S	Small	60 - 75 cm	39 - 46 cm
T35BS/MS	Medium/Small	75 - 90 cm	39 - 43 cm
T35BS/M	Medium	75 - 90 cm	42 - 49 cm
T35BS/ML	Medium/Large	75 - 90 cm	45 - 52 cm
T35BS/LS	Large/Small	90 - 105 cm	42 - 49 cm
T35BS/L	Large	90 - 105 cm	45 - 52 cm
T35BS/XLS	X-Large/Small	105 - 115 cm	45 - 52 cm
T35BS/XL	X-Large	105 - 115 cm	49 - 56 cm
T35BS/XXL	XX-Large	115 - 125 cm	53 - 60 cm

* Höjd (B) tas från mitten av pubisbenet till sternum.

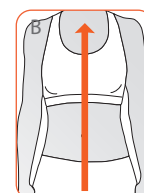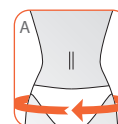

Rygg



Tecnoway T45BS

T45BS är en stabil 3-punktsortos och används efter skada eller operation av ryggen. Den ger en fast extension och fi ering vilket effektivt förhindrar fl xion och rotation av länd- och bröstrygg. Ortosen kan anpassas och justeras individuellt i höjd och bredd över bröstet. Bröstbygeln kan även justeras individuellt i vinkel. Sidospännet är enkelt att justera, öppna och stänga. Höftdelen är lätt rörlig vilket förenklar sittande, och kan låsas vid behov.

Material: Aluminium, plast, nylon

Funktioner

- Stabil 3-punkts ortos
- Ställbar bröstdel
- Effektiv fi ering av rygg
- Förhindrar fl xion och rotation
- Justerbar höjd och bröstvidd
- Enkelt och säkert ryggsänne
- Rörlig höftdel förenklar sittande
- Finns i vattenavvisande material lämpad för bad.
- Fri från Latex, Nickel

Indikationer

- Stabila lumbala och thorakala frakturer
- Stabila kompressionsfrakturer
- Preoperativ och postoperativ stabilisering
- Övrig lumbo-thorakal stabilisering

Färg: ☐




▲ Justerbar i sidled.



▲ Enkel och säker låsme-kanism.



▲ Justerbar thorakaldel.

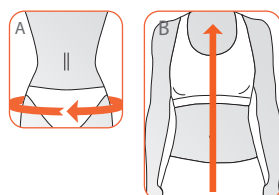

* Höjd (B) tas från mitten av pubisbenet till sternum.

Art.nr.	Storlek	Höftmått (A)	Höjd (B) *	Övrigt
T45BS/XS	X-Small	50 - 60 cm	36 - 40 cm	
T45BS/S	Small	60 - 75 cm	39 - 46 cm	
T45ABS/S	Small	60 - 75 cm	39 - 46 cm	Vattenavvisande
T45BS/MS	Medium/Small	75 - 90 cm	39 - 43 cm	
T45ABS/MS	Medium/Small	75 - 90 cm	39 - 43 cm	Vattenavvisande
T45BS/M	Medium	75 - 90 cm	42 - 49 cm	
T45ABS/M	Medium	75 - 90 cm	42 - 49 cm	Vattenavvisande
T45BS/ML	Medium/Large	75 - 90 cm	45 - 52 cm	
T45ABS/ML	Medium/Large	75 - 90 cm	45 - 52 cm	Vattenavvisande
T45BS/LS	Large/Small	90 - 105 cm	42 - 49 cm	
T45ABS/LS	Large/Small	90 - 105 cm	42 - 49 cm	Vattenavvisande
T45BS/L	Large	90 - 105 cm	45 - 52 cm	
T45ABS/L	Large	90 - 105 cm	45 - 52 cm	Vattenavvisande
T45BS/XLS	X-Large/Small	105 - 115 cm	45 - 52 cm	
T45ABS/XLS	X-Large/Small	105 - 115 cm	45 - 52 cm	Vattenavvisande
T45BS/XL	X-Large	105 - 115 cm	49 - 56 cm	
T45ABS/XL	X-Large	105 - 115 cm	49 - 56 cm	Vattenavvisande
T45BS/XXL	XX-Large	115 - 125 cm	53 - 60 cm	

Rygg



Boston Night Shift

Boston Night Shift är en sk. Nattkorsett för behandling av icke-operativ idiopatisk skolios. För unga patienter som har svårt att bära sin korsett dagligen under längre tid kan nattkorsett vara ett bra alternativ. Acceptansen är ofta större och kan öka motivationen att använda korsetten i den utsträckning som krävs. Night Shift tillverkas efter den senaste tekniken där man använder kroppsscanning, analys av röntgenbild samt orderformulär för att tillverka en helt individuellt producerad korsett. Passformen blir perfekt och vid behov kan pelotterna avlägsnas och justeras.

Korsetterna kan kompletteras med en sk. iButton för att kunna registrera och följa upp patientens användande och öka motivation.

Boston Night Shift tillverkas i en mängd olika färger och mönster för att på bästa sätt få patienten att uppleva sitt hjälpmedel så tilltalande som möjligt.

Funktioner

- Används endast nattetid
- Smidig design och perfekt passform
- Producerad efter kroppsscanning
- 100% individuellt tillverkad
- Asymmetrisk form
- Avtagbara pelotter för justering

Storlek: Måttbeställd

Material: Copolymer, Aliplast

Art.nr	Modell
BOP-NS-F-01	Standard white
BOP-NS-F-02	Colour sheet
BOP-NS-F-03	Random pattern
BOP-NS-F-04	Logo spot
BOP-NS-F-01-IB	Standard white, iButton
BOP-NS-F-02-IB	Colour sheet, iButton
BOP-NS-F-03-IB	Random pattern, iButton
BOP-NS-F-04-IB	Logo spot, iButton

Rygg



Boston SSO

Boston Soft Spinal Orthosis (SSO) är utvecklad för patienter som lider av neuromuskulär skolios eller sjukdom. Modellen finns som Positionerande (Postural) och Korrigerande (Corrective). Boston SSO tillverkas efter mått och/eller scanning av patienten med individuell röntgenanalys. Produktionen sker via CAD/CAM teknik och varje korsett är helt individuellt tillverkad utifrån ett fräst positiv av patientens bål. Individuella anpassningar, öppningar, färg och mönsteralternativ beroende på patientens behov styrs via respektive Orderformulär.

Design och komfort gör Boston SSO lämplig för att behandla ett brett spektrum av problem relaterade till instabilitet i bålen, vilket bidrar till en förbättrad livskvalitet för användaren genom att erbjuda ökat stöd och stabilitet samt korrigering i dom fall det behövs.

Funktioner

- Positionerande modell (Postural) för NM skolios
- Korrigerande modell (Corrective) för NM skolios
- Individuell buköppning för lättare andning
- Anterior eller Posterior öppning
- Lätt att rengöra

Storlek: Måttbeställd

Material: Copolymer, Aliplast

Art.nr	Modell	Färg/ Mönster
BOP-SSO-C-01	Corrective	Standard white
BOP-SSO-C-02	Corrective	Colour sheet
BOP-SSO-C-03	Corrective	Random Pattern
BOP-SSO-C-04	Corrective	Logo Spot
BOP-SSO-P-01	Postural	Standard white
BOP-SSO-P-02	Postural	Colour sheet
BOP-SSO-P-03	Postural	Random Pattern
BOP-SSO-P-04	Postural	Logo Spot

Axel & Arm



eSplint Humerus

eSplint Humerus stabiliserar överarmen efter humerus fraktur. Ortosens design gör den enkel att applicera och anpassa runt överarmen. Invändiga plattor runtom armen ger tillsammans med dom cirkulära banden kompression och smärtlindring. Plattorna är stabila och följsamma för god passform och kan anpassas med sax vid behov eller delvis avlägsnas om mindre stabilitet önskas. Om ortosen är stor i omfång kan dom smala plattorna avlägsnas för att ge mindre omfång runt armen. Ortosen är behaglig att bära och både arm och bröstband är justerbara. Produkten är MR kompatibel.

Material: Bomull, Polyester, Elastan, Polypropylen

Funktioner


- Smärtlindrande överarmsortos
- Invändiga plattor för stabilitet
- Cirkulära band för kompression
- Mjukt och behagligt material
- Justerbar axelrem med polstring
- Röntgenkompatibel

Indikationer

- Konservativ behandling av sluten humerusfraktur
- Postoperativ behandling av humerusfrakturer

Färg: ●

Art.nr	Storlek	Överarm omkrets (A)	Längd ortos (B)
E315102	X-Small	20 - 25 cm	27 cm
E315103	Small	25 - 30 cm	28 cm
E315105	Medium	30 - 35 cm	29 cm
E315107	Large	35 - 40 cm	30 cm
E315108	X-Large	40 - 45 cm	40 cm
E315109	XX-Large	45 - 50 cm	50 cm

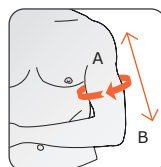

Måtten anger ortosens omfång och längd. Ortosen är pga kardborrelösningen generös gällande omfångsmåtten. Val av längd avgör även frakturens placering. Dom små plattorna i sidofacken kan tas ut vid behov för att ge mindre omfång.

Ben & Knä



I Längd: 44-69 cm



▲ Teleskopled



▲ Bakre banden fixeras med snabbblås.



Art.nr. 73621

◀ Pelotter för avlastning av operationssår finns som tillbehör.



Instruktionsvideo
T Scope Premier

▲ Skanna QR-koden med din smartphone för att se video.

T Scope Premier

T Scope Premier används för postoperativ eller posttraumatisk stabilisering av ben och knä där immobilisering eller kontrollerat rörelseomfång behövs. Ortosen passar höger och vänster ben och längden justeras med teleskopinställning. Leden kan enkelt justeras i extension och flexion och via snabbblåsknappen kan ortosen låsas i ett givet läge. Banden säkras med låsklammer som förhindrar att ortosen skjuter samt säkerställer ROM-inställningen. Insidan av ortosen är polstrad med foam för ökad friktion och banden kan enkelt justeras i längd via kardborrekopplingar. Håkar på banden förenklar av- och påtagning för patienten.

Material: Aluminium, plast, foam, nylon

Funktioner

- Teleskopinställning (44 - 69 cm)
- Universal storlek
- Passar höger och vänster
- Snabbblås för fixering
- Låsklammer av band
- Avlastningspelott för operationssår
- Extension: -10° till 30° (10° intervall)
- Flexion: -10° till 120° (10° intervall)

Optimal
post-op
behandling

Indikationer

- Postoperativ stabilisering efter knäoperation
- Posttraumatisk stabilisering efter knäskada
- ACL, PCL, CL operation
- Tibiaplatå fraktur
- Menisk reparationer
- Patellarseneruptur
- Kondyl fraktur
- Tibiaosteotomi

Färg: ■

Art.nr.	Storlek	Lårmått
08814	Standard	< 77 cm
08815	X-Large	77 - 90 cm

Art.nr.	Tillbehör till T Scope Premier
00015	Foamset T Scope Premier
SPR	Band o Söljor T Scope Premier
73621	Avlastningspelott T Scope Premier



Ben & Knä



Längd: 35-40 cm (strl. S-XXL)

Information måttbeställda ortoser

För patienter med oproportionerlig benform och i de fall en standard ram inte passar finns måttbeställda ortoser som ger en perfekt passform och komfort. Använd Breg Measuring System för individuell måtttagning, se sid 91. För mer information kontakta vår kundsupport.

X2K Adjustable Hinge

X2K ortosen är grundmodellen i Bregs knäortossortiment. Genom "diamondshape-ramen" blir konstruktionen mycket stabil i sidled och får bra vridstyvhet. Ortosen används för ligamentskador och kronisk instabilitet i knäleden. Modellen bygger på bra kondylkontakt för att skapa stabilitet runt knäleden tillsammans med ramens långa hävarmar. Anti-slip systemet under och ovan knät ser till att ortosen sitter på plats och inte glider ner. Kondylkuddarna justeras individuellt för en perfekt passform och anläggningsyta. Leden är ställbar i extension och flexion.

Material: Lättviktsaluminium

Funktioner

- Justerbara kondylkuddar
- Anti-slip system
- Lättviktsaluminium
- Rotationskontroll
- Extension: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- Flexion: 45°, 60°, 75°, 90°

Indikationer


- Främre korsbandsskada
- Kollateralligamentskada
- Kronisk instabilitet

Färg:

Art.nr. Vä	Art.nr. Hö	Storlek	Lårmått (A)	Knämmått (B)
20320	20420	Small	39 - 46 cm	32 - 37 cm
20330	20430	Medium	46 - 50 cm	37 - 39 cm
20335	20435	Medium +	50 - 53 cm	39 - 41 cm
20340	20440	Large	53 - 61 cm	41 - 46 cm
20350	20450	X-Large	61 - 69 cm	46 - 50 cm
20360	20460	XX-Large	69 - 76 cm	50 - 56 cm




Kan måttbeställas;
Art. 20001 - X2K Custom
Art. 20002 - X2K Adjustable Hinge Custom

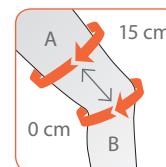

Vrist & Fot

Kolfibe
AFO

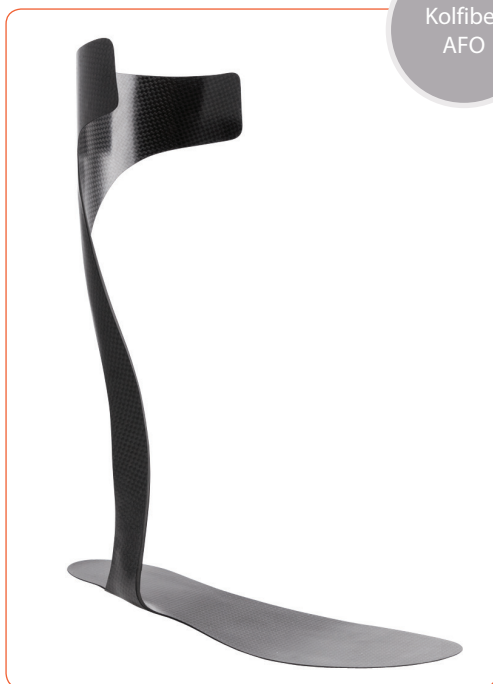

↑ Höjd Small: 30 cm
↓ Höjd Large: 33 cm



▲ Vadbygel med polstrat tibiaband.



▲ Lateral bygel med smidig design. För patienter som behöver mer utrymme runt den laterala malleolen finns Wide modell.



Informationsvideo
Comfit AF

▲ Skanna QR-koden med din smartphone för att se video. (För att skanna koden måste du ha en QR-läsare, detta laddar du ner ifrån App Store, Android market eller motsvarande app-resurs för din mobila enhet.)

Comfit AF

Comfit AFO vänder sig till patienter som lider av droppfot. Med innovativ design är den lätt, bekväm och smidig att använda. Den laterala bygeln ligger nära fot och underben utan att komma i konflikt med malleolen och den är ovanligt smidig inne i skon. Vadbygeln förankras med ett polstrat tibiaband och flexibiliteten i sula och bygel ger framförlift och energiåtergivning för en stabil och säker gång. Standard modellen passar de flesta men för patienter som behöver mer utrymme runt den laterala malleolen finns Wide modell. För patienter som sliter sin AFO extra hårt och för patienter med bilateralt behov rekommenderar vi Comfit AFO – Extra Strong.

Material: Kolfiber p epreg

Smidig i skor

Funktioner

- Kolfibersken
- Droppfotsortos
- Smidig design
- Lateral bygel
- Posterior vaddel
- Polstrat tibiaband

Indikationer

- Droppfot

Kontraindikationer

- Spasticitet
- Högaktiva patienter

Färg: 

Art.nr. Vä	Art.nr. Hö	Storlek	Skostorlek **
E806113	E806123	Small	< 42
E806117	E806127	Large	42 - 47
E806157	E806167	Large / Wide *	42 - 47


Art.nr.	Tillbehör till Comfit
E8061T03	Classic Pad Kit Small
E8061T05	Classic Pad Kit Large

* Mer utrymme för laterala malleolen.

** Skostorleken anpassas genom att fotbladet kortas i framkant ca 10 mm kortare än skons inermått.

Vrist & Fot

Glasfibe
AFO

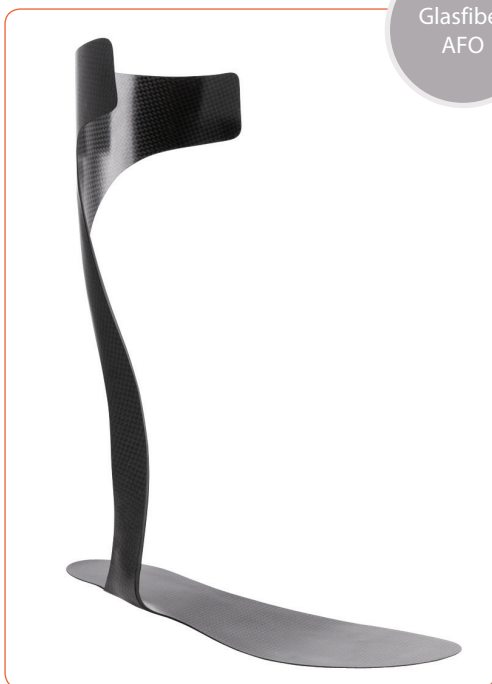

↑ Höjd Small: 30 cm
↓ Höjd Large: 33 cm



▲ Vadbygel med polstrat tibiaband.



▲ Lateral bygel med smidig design. För patienter som behöver mer utrymme runt den laterala malleolen finns Wide modell.



Informationsvideo
Comfit AF

▲ Skanna QR-koden med din smartphone för att se video. (För att skanna koden måste du ha en QR-läsare, detta laddar du ner ifrån App Store, Android market eller motsvarande app-resurs för din mobila enhet.)

Comfit AFO - Extra Strong

Comfit AFO – Extra Strong har samma design och passform som Comfit AFO. Skillnaden är materialkompositionen som är Glasfiber för ökad flexibilitet och hållbarhet. Modellen rekommenderas i första hand till brukare som sliter sin AFO extra mycket och framförallt för bilaterala behov. Ytan har kolfiber film för att få en slätare yta och bättre finish

Material: Glasfibe

Funktioner

- Glasfibersken
- Droppfotsortos
- Smidig design
- Lateral bygel
- Posterior vaddel
- Polstrat tibiaband

Indikationer

- Droppfot
- Bilateral droppfot

Kontraindikationer

- Spasticitet
- Högaaktiva patienter

Extra
Hållbar

Färg: 

Art.nr. Vä	Art.nr. Hö	Storlek	Skostorlek **
E807113	E807123	Small	< 42
E807117	E807127	Large	42 - 47
E807157	E807167	Large / Wide *	42 - 47

E807100 | Comfit AFO - Extra Strong, Custom

Art.nr.	Tillbehör till Comfit
E8061T03	Classic Pad Kit Small
E8061T05	Classic Pad Kit Large

* Mer utrymme för laterala malleolen.

** Skostorleken anpassas genom att fotbladet kortas i framkant ca 10 mm kortare än skons innermått.

Vrist & Fot



I Höjd: 10 cm

Elevate Brace

Elevate Brace används främst av aktiva patienter som lider av droppfot. Med den populära BOA tekniken justeras fotens dorsallyft enkelt och individuellt och ger förutsättningar för en mer normal gång trots droppfot. Dubbla metallsöljor fästes i skons snörhål, alternativt monteras i skons ovanstycke. Lösningen gör att det är enkelt att byta mellan olika skor.

Färg: 

Art.nr.

Storlek

E.804.100

Universal



Informationsvideo
Elevate Brace

▲ Skanna QR-koden med din smartphone för att se video.



Ankel



Podus Boot

Podus Boot är specifikt utormad för att hålla foten i normalposition samt avlasta hälen i liggande, sittande och stående position. Den är lätt att applicera och polstringen kan enkelt tas bort för byte och tvätt. Tådelen kan justeras i längd för att skydda tårna mot stötar och tryck. Sulan sitter fast och tillåter kortare förflyttning. Om rotationsbygeln fälls ut förhindras foten och underbenet att rotera. Ortosen används vid sårhäkning av hälsår och kan användas i förebyggande syfte för att avlasta hälen och motverka spetsfot.

Funktioner

- Avlastar hälen effektivt
- Motverkar tryck av häl/tår
- Mjuk och tryckavlastande
- Utbytbar foder
- Fast suldel
- Rotationsbygel
- Latexfri

Storlek: Small, Regular (passar höger och vänster fot)

Material: PVC, nylon, polyester, acryl

Färg: ●

Art.nr	Storlek	Skostorlek	Fotlängd
PB/STDS	Standard	36-44	22.5 - 28.5 cm
PB/XLS	X-Large	39-49	25-33 cm

Embreis AB
Tumstocksvägen 11 B
187 66 Täby, Stockholm
Sweden

Phone +46 8 410 621 00
Fax +46 8 410 621 01
Email info@embreis.com

www.embreis.com